



ALFESS™

Bluetooth yhteyden muodostaminen ALFESS:in ja ohjaimen välille

1. Käynnistä ALFESS™.


Käynnistä ALFESS painamalla etupaneelin ympyrä näppäintä 2 sekunnin ajan.



2. Paina ohjaimen set/enter sekä virtanäppäintä samanaikaisesti.

a. Näyttöön ilmestyy teksti "BT init. Contact".

b. Muutaman sekunnin päästä näytö näyttö muuttuu kaksiväriseksi. (sinen pohja ja keltainen viiva näytön yläreunassa ks. kuva 3).

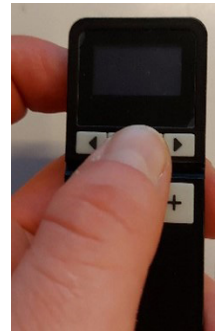


3. Kytke ohjaimen virta pois päältä painamalla ohjaimen virtanäppäintä 5 sekunnin ajan.



4. Käynnistä ohjain uudelleen painamalla ohjaimen virtanäppäintä .

Ohjaimen tila vaihtuu "istuminen tai seisonta" tilaan.

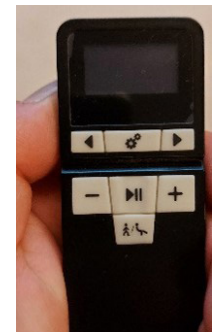

5. Sulje molemmat sekä ALFESS että ohjain painamalla ohjaimen virtanäppäintä .

CAMP[®]
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
Info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
Info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
Info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
Info@camp.no
camp.no