



Käyttöohjeet - Finnish (FI)



www.3pp-eifu.com

Kuvaus: Oval-8-sormituki on muovista valettu ortoosi, joka on suunniteltu tukemaan, suojaamaan ja korjaamaan sormen niveliä. Tuotetta on saatavilla 14 eri kokoa. Oval-8 sormituki on vedenpitävät.


Käyttötarkoitus: Oval-8-sormituki on suunniteltu siten, että tuenta kohdistuu kolmeen pisteeseen sormen ympärille pitäen nivelen suorana. Tämä estää tai rajoittaa nivelen liikettä ja tekee parantumisen mahdollistamiseksi. Sormitukea voidaan käyttää useiden sormitilojen hoitoon riippuen siitä, missä ja miten sitä käytetään sormessa.

Varotoimet: Ei käytettäväksi avoimiin haavoihin. Ei käytettäväksi turvotuksen yhteydessä. Ei käytettäväksi varpaille. Laitte voi aiheuttaa ärsytystä tai painetta sormenpäähän. Lopeta käyttö, jos ärsytystä tai painetta esiintyy. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ärsytys jatkuu. Noudata puhdistusohjeita säännöllisesti. Varoitus: Alle 5-vuotiaat lapset eivät saa käyttää ortoosia. Ortoosin nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen.




Suunta: Miten Oval-8-sormitukea käytetään eri sormitilojen hoitoon.


1. Boutonniere epämuodostuma

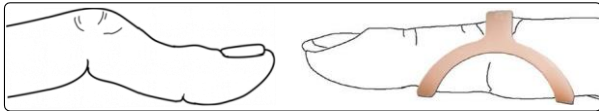


4. Mallet sormi

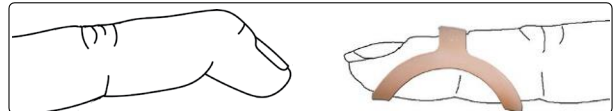


2. Vinko sormi

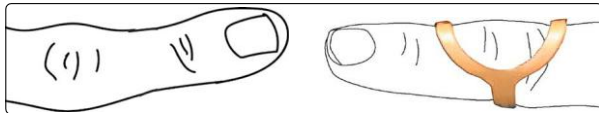


5. Joutsenkaulan epämuodostuma

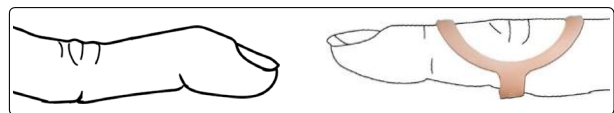



3. Liipaisinpeukalo

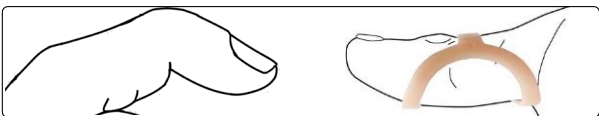

6. Liipasinsormi

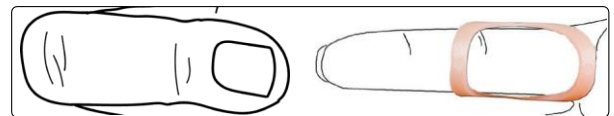

Huomautus: Oval-8-sormituet istuvat tiukemmin tai löysemmin riippuen siitä, kumpi pää asetetaan sormeen ensin. Plus + -merkki tarkoittaa löysemää päätä.

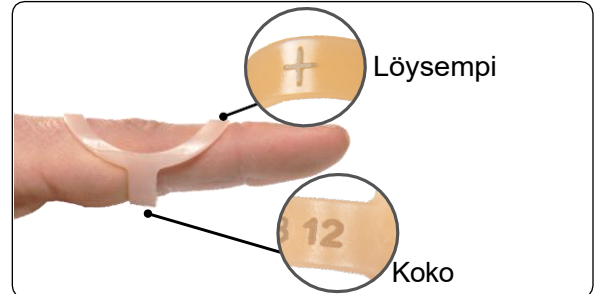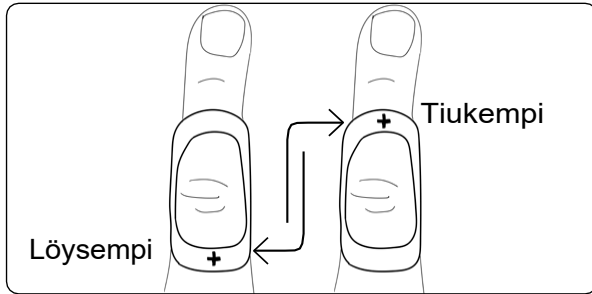

Oval-8-sormituen koon mittaaminen: Ohjeet sormenpäiden mittaamiseen oikean kokoista tuotetta varten löytyvät sivuilta 3 ja 4.

Miten toimitetaan: Sormituki on valmistettu puhtaasta polypropeenista. Tuote on lateksiton. Älä käytä, jos ortoosi on vaurioitunut. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Sitä on saatavana 14 kokoa. Lastoja on saatavilla myös useammassa eri pakkauskoossa. Pakkausvaihtoehdot ovat sivulla 4.

Puhdistus: Pese käsin saippualla ja vedellä ja kuivaa tuote säännöllisesti. Desinfioi tuote 70 % isopropyylialkoholilla tai 10 % valkaisuaineliuksella.

Hävittäminen: Tuote on tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi samalle henkilölle useita kertoja. Hävitä ortoosi, jos siinä on merkkejä liiallisesta kulumisesta, ja vaihda se tarvittaessa uuteen tuotteeseen.

Milloin on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen: Ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos koet laitteen aiheuttamia haittavaikutuksia, mukaan lukien ihoreaktio tai muutokset kunnossa.


Ilmoitus käyttäjälle ja/tai potilaalle: Jos laitteeseen liittyy haittatapahtuma, poista laite ja ilmoita tapahtumasta jakelijalle ja valtuutetulle edustajalle.

Jakelijat: www.3pp-eifu.com/#distributors

Etiketin symbolit: Kaikki tuoteselosteessa tai tuotekirjallisuudessa käytetyt symbolit on määritelty 3-kohtaisessa tuotesymbolien selityksessä: www.3pp-eifu.com/#symbols.



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com

+001.410.604.6393 



Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16 5020
Salzburg Austria

service@sallmann-medical.eu






Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug



Sormen koon mittaaminen Oval-8-sormitukea varten

Oval-8-sormituet ovat lääkinällisiä laitteita, ja tiukalla istuvuudella saavutetaan yleensä tehokkaimmat tulokset. Oikea koko riippuu siitä, mikä sormiongelma on ja missä lastaa käytetään. Noudata ohjeita.

Tarvitset:

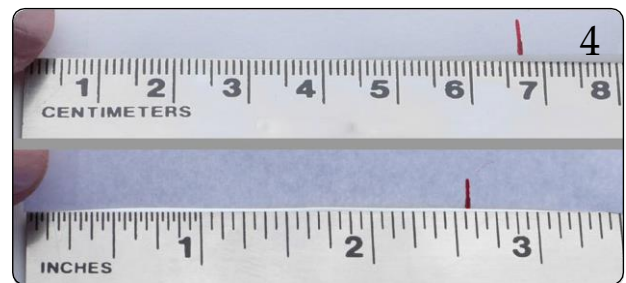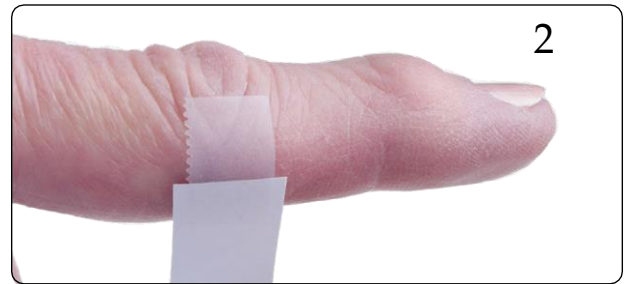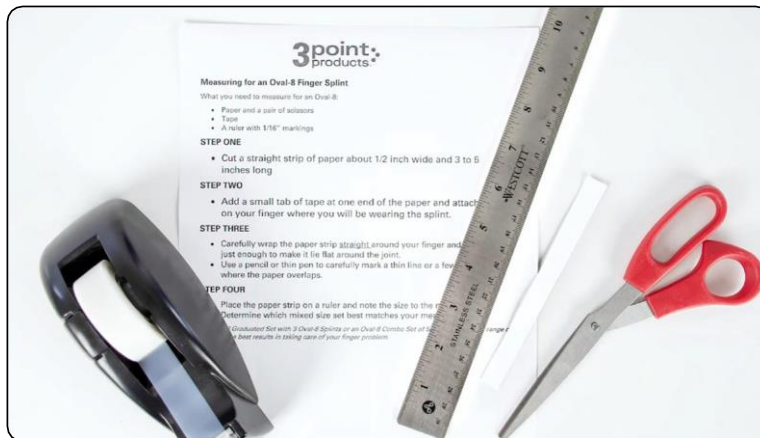



Oval-8 koko- ja pakkausvaihtoehto taulukot

Oval-8 kokotaulukko		
Ovaali-8 Koko	Mittaus tuumaa	Mittaus senttimetrit
2	1-3/4"	4.3
3	1-13/16"	4.5
4	1-15/16"	4.95
5	2-1/6"	5.27
6	2-3/16"	5.7
7	2-5/16"	5.86
8	2-7/16"	6.14
9	2-1/2"	6.35
10	2-11/16"	6.82
11	2-13/16"	7.09
12	2-15/16"	7.4
13	3"	7.65
14	3-3/16"	8.09
15	3-1/4"	8.2

Oval-8 Pakkausvaihtoehdot							
Ovaali-8 Koko	Yksi (1) per pakkaus	Kolme (3) per pakkaus	Viisi (5) per pakkaus	Porrastettu sarja kolme (3) kokoa	Oval-8-sarja Klinikkalaatikko, jossa on 44 lastaa	Määrä kokoa kohti	
2	√	√	√	2-3-4	Koot 2 ja 15	1	
3	√	√	√	4-5-6		Koot 3-4 & 13-14	2
4	√	√	√	6-7-8		Koot 11 ja 12	3
5	√	√	√	8-9-10		Koot 5 ja 10	4
6	√	√	√	10-11-12		Koko 6-7-8-9	5
7	√	√	√	13-14-15	Mitoitussarja yksi (1) kutakin kokoa kohti - yhteensä 14	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	
8	√	√	√	Combo Set viisi (5) kokoa			
9	√	√	√				
10	√	√	√				
11	√	√	√				
12	√	√	√				
13	√	√	√	2-3-4-5-6			
14	√	√	√	5-6-7-8-9			
15	√	√	√	8-9-10-11-12			
				11-12-13-14-15			
Kaikkia paketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikilta myyjiltä.							