

**CAMP**<sup>®</sup>

**3D-LITE**<sup>™</sup>  
Cut-4-Custom  
LSO & TLSO

Valmista

**YKSILÖLLINEN  
SELKÄORTOOSI**

nopeasti ja  
yksinkertaisesti!



Lämmitä uunissa 70-80°C asteessa tai lämpöpuhaltimella noin 3 minuuttia.



Muotoile selkäosa potilaan selkää vasten.



Kiedo joustava sidos tai elastinen tukivyö vyötärön ympärille, kunnes materiaali on jähmettynyt.



Lämmitä etuosa ja muotoile se potilaalle. Sulje tarranauhat huolellisesti.

# Yksilöllinen LSO tai TLSO

## 3D-LITE™

### CUT-4-CUSTOM

#### Kun tarvitset yksilöllisesti muotoillun korsetin!

- C4C on valmistettu 3D-LITE™ matalalämpömuovimateriaalista.
- Nauhat ja soljet ovat valmiiksi asennettuja etu- ja takaosaan. Etu- ja takaosa ovat valmiita lämmitettäväksi ja muotoiltaviksi potilaan ylle.
- 2 eri korkeutta, jotka sopivat eri diagnooseille ja hoitomenetelmille.
- Etu- ja takaosat myydään erikseen, minkä vuoksi eri korkeuksia on mahdollista yhdistellä.

#### Indikaatiot

- Post-operatiivinen käyttö, kompressiomurtumat ja selkärangan immobilisaatio.





Muotoile etuosa.



Aseta joustava sidos tai elastinen tukivyö taka- ja etuosan päälle ja anna jähmettyä.



Varmista korsetin istuvuus istuma- ja seisoma-asennossa.

alle 30 minuutissa!!!

**3D-LITE™** on kolmiulotteinen polyesterimateriaali, joka on käsitelty kovetetulla matalalämpömuovilla.

3D-LITE on täysin myrkytön materiaali, josta ei irtoa haitallisia aineita sitä kuumennettaessa, työstettäessä tai sen jähmettyessä. Materiaalia voidaan käsitellä ilman käsineitä tai kipsihuoneen vaativaa ilmastointia. Se on vaaraton työskentelyyn ja käyttöön, myös raskaana oleville, allergisille henkilöille tai astmaatikoille.

#### Ensimmäinen asiakaskäynti

- Materiaali on pehmeää ja valmis muotoiltavaksi asiakkaan ylle alle 10 minuutissa.
- Yksilöllisesti valmistettu LSO tai TLSO -korsetti on valmis alle 20 minuutissa.
- Voidaan lämmittää ja muotoilla uudelleen!
- Esiasennetun nauhan paikkaa voidaan muuttaa toiseen kohtaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

#### Ihanteellinen muotoiltavuus ja istuvuus

- Materiaali joustaa vain yhteen suuntaan
- Materiaali on stabiili kaikkiin suuntiin

#### Mukavamman tuntuinen ja käyttäjätavallisempi

- Hengittävä
- Kevyt
- Myrkytön - ei aiheuta ihoärsytystä
- Voi käyttää suihkussa





# MITANOTTO-OHJEET

## 3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



### Koko

Koko määritellään vyötärön ympäryksen mukaan. Mitta saa olla jokseenkin tiukka. Mittaa myös korkeus kokoon nähden. Valitse sopiva koko taulukosta.

	Tuotekuvaus	Ympärysmitta cm:ssä		Etuosan korkeus cm:ssä	Takaosan korkeus cm:ssä
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO etuosa



LSO selkäosa





TLSO etuosa



LSO selkäosa

Kuvat antavat viittellisen arvion LSO:n ja TLSO:n erimallien korkeuksista.

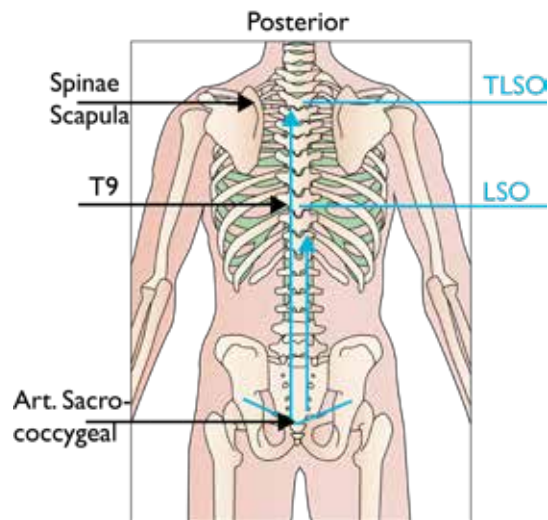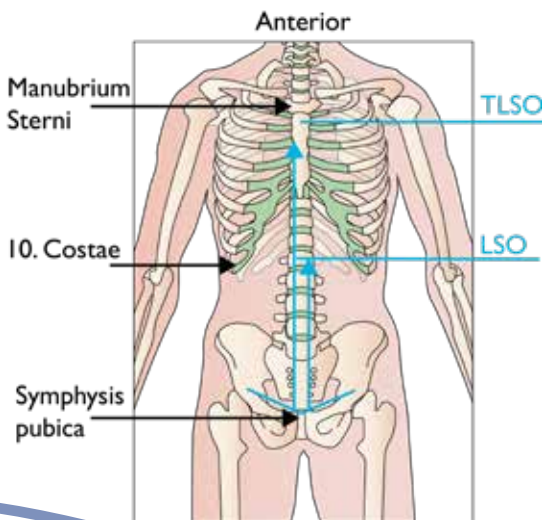

CampScandinavia, DEC\_2020©