

## YPSILON® *flow*



### *Go with the flow!*

- Aktiiviselle henkilölle, jolla on riippunilkka.
- Kun jalka tarvitsee vähemmän tukea kävelyn tukivaiheessa.
- Sallii laajemman liikeradan käytön.
- Dynaamisesti mukautuva ilman rajoituksia!
- Uusin tuotekehityksemme jalka-nilkkaoortoseissa, mikä on valmistettu ympäri maailmaa tunnetulla Campin hiilikuitukomposiittiteknologialla.

*PS. Ortoosissa on myös aiempaa matalampi kannankorkeus, vain 7 mm!*



## Ypsilon® FLOW:n käyttöedut

- **Optimaalinen liikerata sagittaalitasolla**  
Sopeutuu hyvin epätasaiseen ja mäkiseen maastoon sekä otettaessa pidempiä askelia, mikä liittyy usein aktiivisen henkilön tehokkaampaan kävelyyn.
- **Pohjalevyn uusi muotoilu**  
Antaa dynaamisuutta varvastyöntöön rajoittamatta normaalia aktiivista kävelyä.
- **Matalampi kannan korkeus**  
Antaa laajemman tukipinnan tukivaiheessa tehostaen varvastyöntöä ja vähentäen siten siihen tarvittavaa voimaa. Auttaa henkilöitä, joilla on heikkoutta sagittaalialueella, saamaan helpommin "tehoa irti" ortoosista.
- **Tasainen ja sileä alaosa**  
Ortoosi mahtuu hyvin erilaisten kenkien sisälle.
- **Edesauttaa päkiän nostoa**  
Pohjalevyn etuosa on suurempi, minkä vuoksi varvasosalle jää enemmän tilaa.

## Anatomisesti muotoiltu tibiakisko

Sääreen kohdistuva painopiste jakautuu tibian molemmille puolille painamatta kuitenkaan säären ulkonevia kohtia. Kätevä ja ohut muotoon ommeltu pehmuste antaa matalan profiilin. Sileän kiinnitysnauhan ansiosta vaatteet liukuvat helposti ortoosin päälle. Nauhan kiinnityksen puolisuus voidaan valita oikealle tai vasemmalle puolelle.





# Sinulle, joka tarvitset lisää joustavuutta!




Ypsilon Flow on aktiiviselle henkilölle, joka tarvitsee vähemmän tukea kävelyn tukivaiheessa, suunniteltu riippunilkkartoosi. Ortoosia on kehitetty mahdollistamaan koko optimaalisen liikeradan ja dynaamisen varvastyönön eli "ToeOFF®"-toiminnan käyttö samalla kun jalan lihakset voivat työskennellä aktiivisemmin.

Pohjalevy myötäilee jalan muotoa ja kantaiskusta siirtyvän voiman avulla voi ortoosikävelijä käyttää vähemmän voimaa varvastyönössä eli "ToeOFF®"-vaiheessa.

Y-muotoinen runko jakautuu tibian molemmille puolille, mikä vähentää painaumien syntymisen riskiä ulkonevissa kohdissa sekä säärihuuissa. Siksi tämä ortoosi sopii aktiiviselle ihmiselle, joka asettaa korkeat vaatimukset ortoosin toiminnallisuudelle ja liikkuvuudelle.

## ToeOFF®-tuoteperheen toiminnallisuusportaat

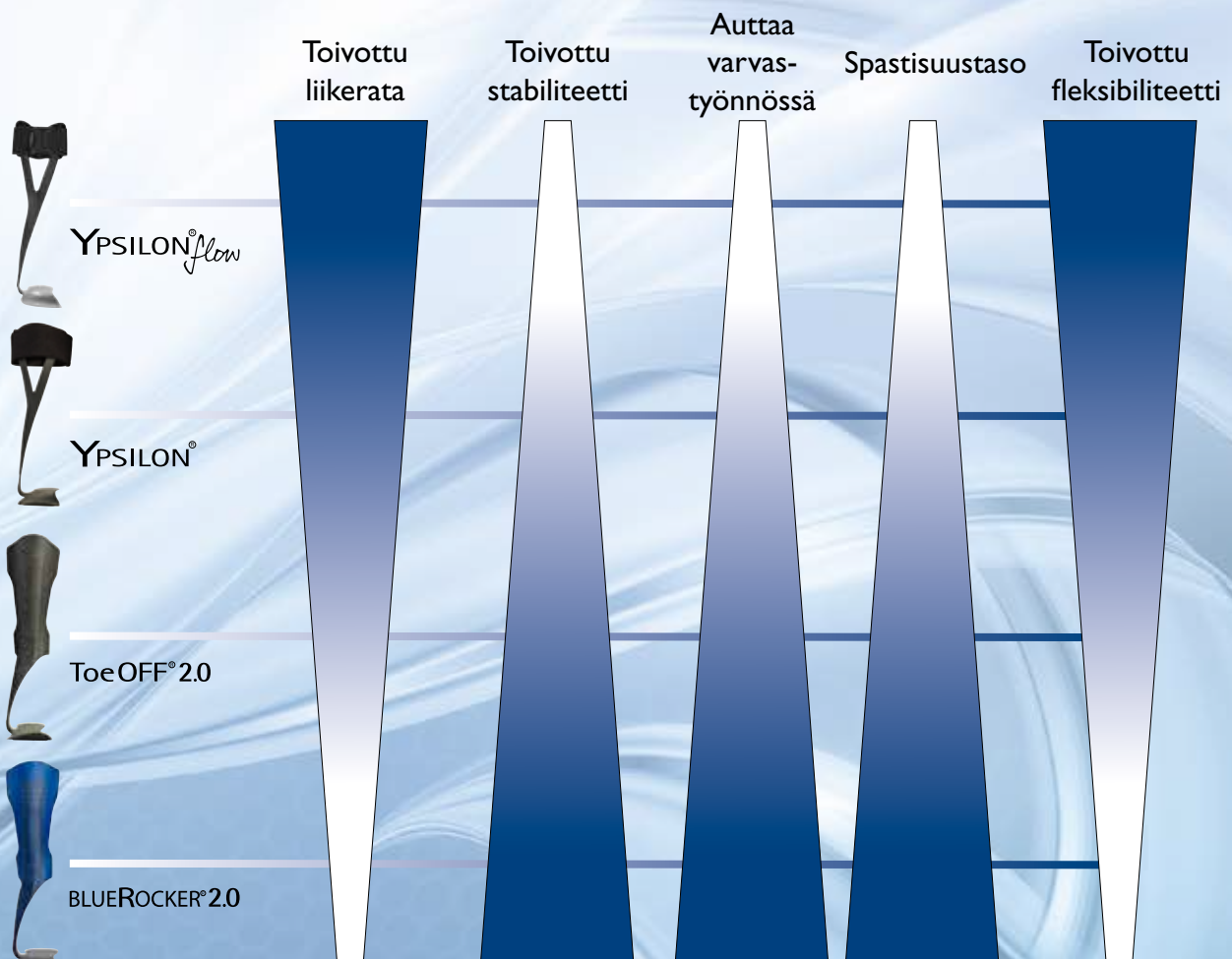

# Support for Better Life!



## Ypsilon®Flow, sisältäen pehmusteen ja kiinnitysnauhan

Tuotenro. Vasen	Tuotenro. Oikea	Koko	Pohjalevyn pituus	Korkeus	Kannan korkeus
28880 1011	28880 2011	Small	230 mm	355 mm	7 mm
28880 1012	28880 2012	Medium	245 mm	365 mm	7 mm
28880 1013	28880 2013	Large	270 mm	375 mm	7 mm
28880 1014	28880 2014	X-Large	285 mm	385 mm	7 mm

## Ypsilon®Flow, sovitustoosi ja sovitussetti

Tuotenro. Vasen	Tuotenro. Oikea	Koko	Pohjalevyn pituus	Korkeus	Kannan korkeus
28881 1011	28881 2011	Small	230 mm	355 mm	7 mm
28881 1012	28881 2012	Medium	245 mm	365 mm	7 mm
28881 1013	28881 2013	Large	270 mm	375 mm	7 mm
28881 1014	28881 2014	X-Large	285 mm	385 mm	7 mm
28882 0000	Sovitussetti sisältäen koot Small, Medium, Large - vasen ja oikea				

## Ypsilon®Flow, kiinnitysnauha ja pehmuste

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Koko
28884 0012	Pehmuste, sopii oik/vas ja kolmeen eri kokoon	Small/medium/large
28884 0014	Pehmuste, sopii oik/vas	X-Large
28885 0000	kiinnitysnauha, sopii oik/vas ja kaikkiin kokoihin	Yksi koko

