

# Carbon Footplate & Carbon Footplate Rigid






# Carbon Footplate tarjoaa vakautta ja tuentaa

Kehitetty lähes kolmen vuosikymmenen kokemuksella hiilikomposiittisista AFO:ista.

Hiilikuitupohjallinen on autoklavoitu, kevyt ja mukailtu kengän siluetin mukaan. Tämä takaa miellyttävämmän istuvuuden. Jalkalevy auttaa parhaiten erilaisten rasitusmurtumien, vammojen, varvasamputaatioiden tai nivelrikon aiheuttamien kiputilojen hoidossa. Hiilikuitupohjallinen on saatavana sekä tavallisena että jäykkänä paksuutena.

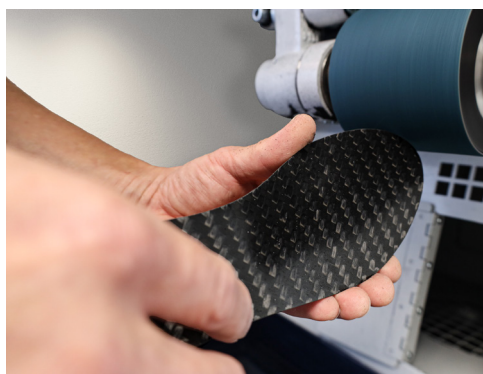

*Käytä hiomalaikkaa tai Dremeliä hiomaan ja säätämään hiilikuitupohjallista. Noudata aina tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita, kun säädät hiilikuitupohjallista.*

## Tuotetaulukko

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Pituus	Leveys	Paksuus
280351011	Carbon Footplate	Small	Vänster	235 mm	77 mm	1,8 mm
280351012	Carbon Footplate	Medium	Vänster	255 mm	80 mm	1,8 mm
280351013	Carbon Footplate	Large	Vänster	275 mm	90 mm	1,8 mm
280351014	Carbon Footplate	X-Large	Vänster	305 mm	99 mm	1,8 mm
280352011	Carbon Footplate	Small	Höger	235 mm	77 mm	1,8 mm
280352012	Carbon Footplate	Medium	Höger	255 mm	80 mm	1,8 mm
280352013	Carbon Footplate	Large	Höger	275 mm	90 mm	1,8 mm
280352014	Carbon Footplate	X-Large	Höger	305 mm	99 mm	1,8 mm
280361011	Carbon Footplate Rigid	Small	Vänster	235 mm	77 mm	2,0 mm
280361012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Vänster	255 mm	80 mm	2,0 mm
280361013	Carbon Footplate Rigid	Large	Vänster	275 mm	90 mm	2,0 mm
280361014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Vänster	305 mm	99 mm	2,0 mm
280362011	Carbon Footplate Rigid	Small	Höger	235 mm	77 mm	2,0 mm
280362012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Höger	255 mm	80 mm	2,0 mm
280362013	Carbon Footplate Rigid	Large	Höger	275 mm	90 mm	2,0 mm
280362014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Höger	305 mm	99 mm	2,0 mm

# Mukava istuvuus

## Vähemmän kipua

Hiilikuitupohjallinen on suunniteltu suojaamaan MTP-niveliä ja etujalkaterää rajoittamalla liikerataa (ROM), jakamalla painetta ja helpottamalla luonnollista kävelyä. Sitä voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen leikkauksen jälkeisen kengän tai kävelytelineen kanssa liikkuvuuden asteittaiseksi lisäämiseksi.

Hiilikuitupohjallista voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen POST-OP-kengässä tai diabetesjalkineessa liikkumisen asteittaiseksi lisäämiseksi ja tasapainon parantamiseksi varpaiden IV ja/tai V amputoinnin jälkeen.

Hiilikuitupohjallinen on peitettävä kengän omalla tai yksilöllisesti valmistetulla pohjallisella.

Rajoittaa liikelaajuutta  
livittäen kipua.

Muotoiltu jalkaterän  
muotoon miellyttävämmän  
käyttäjäkokemuksen  
takaamiseksi ja parantaen  
kenkään istuvuutta.

Mukautettu kenkiä varten,  
joissa on 5-10 mm koron  
korkeus.



## Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

Danmark  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

Finland  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

Norge  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no