

## **SELECTION®** KÄSILLE JA PEUKALOILLE kehitetty materiaali!

- Suunniteltu optimoimaan toimintaa ja mukavuutta
- Materiaali on pitkän kehitystyön tulos
- Pehmeä sisäpuolelta
- Hengittävä materiaali
- Kuivuu nopeasti
- Kosteutta hylkivä
- Konepestävä
- Voidaan leikata ilman rispaantumista
- Materiaali on testattu SGS:n mukaisesti ihon lähellä oleville tekstiileille
- Mukautuu hyvin käden liikkeisiin
- Tuntuu pehmeältä ja mukavalta
- Ei kovia reunoja
- Koko ja tuen tiukkuus on nauhoilla säädettävissä.
- Matalan profiilin ansiosta ortoosia voidaan käyttää myös käsineiden alla



# SELECTION®


Materiaali kehitettiin muun muassa käden ja ranteen ortoosien valmistukseen

## SELECTION® POWERNET

Toiminto, joka on tekstiilin sisärakenteessa. Tämä tekee materiaalista täydellisen elastisen ja palautuvan, jotta saadaan aikaan hyvä ja muotoutuva tuenta.

## SELECTION® AIR

Ohut, pehmeä ja 100 %:sti ilman läpi päästävä materiaali. Käytetään ortoosin niissä osissa, joissa tekstiili ei saa tuntua eikä lämmittää. Antaa ortoosille lisätaipuisuutta.

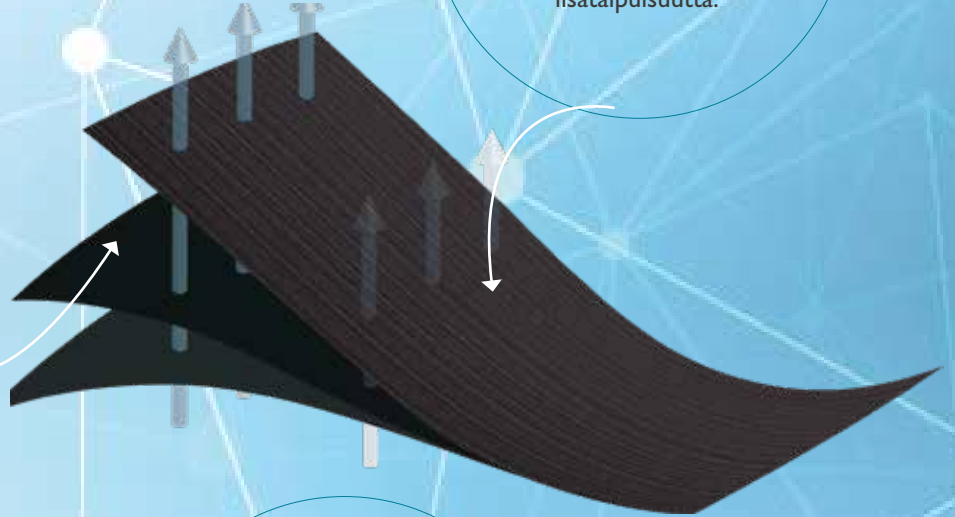

## SELECTION®

Kaikki tuotteemme testataan huolellisesti kansainvälisesti tunnustetuissa testi-instituuteissa varmistaaksemme, että ne eivät sisällä aikuisille tai lapsille haitallisia aineita. Tarranauha, jota tuotteissa käytetään on huolellisesti valittu käyttötarkoitukseensa ja on myös testattu kestävästi toistuvaa avaamista ja sulkemista ilman kulumista.

## SELECTION® AIR & POWERNET

Yhdistelmä antaa anatomisen muotoutuvuuden, joka sallii liikkeen siellä, missä ei rajoituksia tarvita ja tarvittavan stabiliteetin toisaalle. Täydellinen istuvuus pehmeällä sisäosalla ja kestäväällä ulkopinnalla. Tyylikäs ja mukava.

## SELECTION® Fingerloop

Kaksoissidos, joka pitää tehokkaasti kaksi sormeaa tai useampia sormia yhdessä, jotta vahvempi sormi voi auttaa heikompaa sormia tukemaan, suojaamaan ja/tai lisäämään liikelaajuutta. Voidaan käyttää myös staattisena progressiivisena lastana DIP-nivelen liikelaajuuden lisäämiseksi. Side on tehty kestävästä nopeasti kuivavasta nailonista ja se on helppo leikata yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi. Yhtä tai useampaa palaa voidaan käyttää samanaikaisesti. Puolivalmisteinen Fingerloop-levy, joka on 10 cm leveä, voidaan helposti leikata saksilla halutun levyisiksi yksittäisiksi nauhoiksi.

### Käyttöalueet:

loukkaantumisen, leikkauksen tai vakaan murtuman jälkeen, metakarpaaliluun murtumat, krooniset kiputilat, nyrjähdykset, nivelten kuluminen ja kontraktuuran hoidossa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Pituus	Pakkauskoko
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1

## SELECTION® Peukalotuki SOFT

Joustava ja elastinen peukalo-ortoosi, joka vähentää peukalonivelen rasitusta ja antaa kevyen tuen. Lievemmissä CMC- ja MCP-haasteissa vähentää rasitusta, mutta tukee aktiivisessa tartunta-otteessa. Levossa pitää peukalon neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja jänteitä. Voidaan leikata toivottuun muotoon.

### Käyttöalueet

Reumasairaudet, keventäminen, peukalonivelen yli liikkuvuus, CMC-I arthroosin lievitys.

Tuoteno.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
35200	Musta	Vas/Oik	X-Small	< 13 cm
35200	Musta	Vas/Oik	Small	13-15 cm
35200	Musta	Vas/Oik	Medium	15-17 cm
35200	Musta	Vas/Oik	Large	17-20 cm
35200	Musta	Vas/Oik	X-Large	>20 cm
35201	Beige	Vas/Oik	X-Small	< 13 cm
35201	Beige	Vas/Oik	Small	13-15 cm
35201	Beige	Vas/Oik	Medium	15-17 cm
35201	Beige	Vas/Oik	Large	17-20 cm
35201	Beige	Vas/Oik	X-Large	>20 cm



## SELECTION® Peukalotuki RIGID

Pehmeä ja elastinen peukalo-ortoosi, jossa on lisätukea koko peukalon rakenteessa. Muotoilu antaa tukea thenarilihaksille, pitää peukalon neutraaliasennossa ja vähentää rasitusta CMC- ja MCP-nivelissä sekä tukee aktiivisessa tartuntaotteessa. Levossa pitää peukalon neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja jänteitä. Voidaan leikata toivottuun muotoon.

### Käyttöalueet

Reumasairaudet, keventäminen, peukalonivelen yli liikkuvuus, CMC-I arthroosin lievitys.

Tuoteno.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
35202	Musta	Vas/Oik	X-Small	< 13 cm
35202	Musta	Vas/Oik	Small	13-15 cm
35202	Musta	Vas/Oik	Medium	15-17 cm
35202	Musta	Vas/Oik	Large	17-20 cm
35202	Musta	Vas/Oik	X-Large	>20 cm
35203	Beige	Vas/Oik	X-Small	< 13 cm
35203	Beige	Vas/Oik	Small	13-15 cm
35203	Beige	Vas/Oik	Medium	15-17 cm
35203	Beige	Vas/Oik	Large	17-20 cm
35203	Beige	Vas/Oik	X-Large	>20 cm





## SELECTION® SHORT

Taipuisa, elastinen ranneortoosi ilman lastaa, mutta volaaripuolen vahvistuksella. Ortoosi on lyhyempi kuin SELECTION® Ranneortoosit Soft ja Rigid ja tukee kompression avulla estämättä liikkuvuutta. Matala kämmenlinja seuraa käden luonnollista taivutkohtaa. Nauhojen tullessa ulnaaripuolelta, pienenee riski peukalon asettumisesta väärään asentoon. Kaksiosainen kiinnitys tekee ortoosista yhdellä kädellä helposti avattavan ja suljettavan ja mahdollistaa kyynärvarren leveyden säädön leveämmälle kyynärvarrelle. Peukalohihna on säädettävä. Materiaalin rakenteen vuoksi on mahdollista leikata malli saksilla optimaaliseen muotoon. Ortoosin pituus on 13 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Tukee ja vähentää rasitusta ranteessa vamman ja operaation jälkeen, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai yllirasituksessa. Ganglio leikkauksen jälkeen ja kun ranteeseen tarvitaan kompressiota. Ehlers-Danlos syndroomaan liittyvät yliikkuvat nivelet. Tukea voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevästi kun ranteeseen kohdistuu raskaita ja monotonisia liikkeitä.

Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
35222/35223	Musta/Beige	Vas/Oik	X-Small	< 11 cm
35222/35223	Musta/Beige	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm
35222/35223	Musta/Beige	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35222/35223	Musta/Beige	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35222/35223	Musta/Beige	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm



## SELECTION® SOFT

SELECTION® Soft ranneortoosi tarjoaa mediumtason stabiliteetin. Siinä on muotoiltu CS-lasta volaaripuolella ja joustavampi (1 cm leveä) suora muovilasta dorsaalipuolella. Molemmat lastat ovat irrotettavissa. Ortoosi on matala kämmenessä ja seuraa siten kämmenen luonnollista taivutkohtaa ja peukaloalueen muotoilu antaa thenarilihaksille vapaan työskentelytilan. Ortoosin kiinnitys on kaksiosainen, mikä tekee avaamisen ja kiinnittämisen helpoksi sekä mahdollistaa hyvin käsivarren ympärysmittan säädön. Koska nauhat tulevat ulnaaripuolelta, vähenee riski peukalon asettumisesta väärään asentoon. Peukalohihna on säädettävä. Materiaalin rakenteen vuoksi on mahdollista leikata malli saksilla optimaalisesti sopivaksi. Ortoosin pituus on 18 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Kun ranne tarvitsee kevennystä esimerkiksi tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasitusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa.



Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys	Kyynärvarren ympärys
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	X-Small	< 11 cm	
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm	
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm	
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm	
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm	
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	XX-Large	23 - 26 cm	
35204/35205	Musta/Beige	Vas/Oik	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm

\*ainoastaan plusmalleihin leveämmällä kyynärvarren ympäryksellä.

# SELECTION® MULTIOPEN

## KAKSIOSAINEN kiinnitys

**SELECTION® Multiopen on keskistabiili ranneortoosi kaksiosaisella kiinnityksellä. Se voidaan avata koko mitalta ja sulkea tarroilla sekä kiristää nyöriytyksen avulla.**

- Käyttäjä voi valita itse, avataanko ortoosi kokonaan joka kerta puettaessa ja riisuttaessa vai käyttääkö hän vain nyöritystä.
- Ortoosissa on kämmenen alueella matala leikkaus, joka seuraa käden luonnollista taittokohtaa ja peukaloalueen muotoilu antaa tilaa thenarilihaksistolle.
- Kaksiosainen nyöritys yhdessä tarrakiinnityksen kanssa mahdollistaa istuvuuden leveämmälle käsivarrelle.
- Koska nyöritys tulee ulnaripuolelta, pienenee riski, että peukalo asettuu väärin. Säädettävä peukalonauha lähtee volaaripuolelta.
- Materiaalin rakenteen ansiosta tuotetta voi muotoilla saksilla leikkaamalla. Valmistettu ilmastusta ja mukavasta SELECTION®-materiaalista kaikkine siihen kuuluvine toimintoineen.
- Ortoosi on 22 cm pitkä, eli 4 cm pidempi kuin SELECTION® Soft 35204.
- Tuessa on irroitettavissa oleva muotoiltava alumiinilasta volaaripuolella.

Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys
35209	Musta	Vas/Oik	X-Small	< 11 cm
35209	Musta	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm
35209	Musta	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35209	Musta	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35209	Musta	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm
35209	Musta	Vas/Oik	XX-Large	23 - 26 cm





## RADIALIS PEUKALO-OSA

Uutta SELECTION®-sarjassa on Sormiosa ja Peukalo-osa. Ne myydään erillisinä, jotta niitä voidaan yhdistää ortooseihin parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä SELECTION® Radialis Peukalo-osa että Sormiosa on tarkoitettu käytettäväksi Radialispareesissa (riippukäsi, joka johtuu radialishermon vammasta) mahdollistaen toiminnallisen tarttumisotteen hermon toipuessa rauhassa. Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä SELECTION® Ranneortoosimallien 35204, 35205 ja 35209 kanssa.

Tuoteno.	Väri	Vas/Oik	Koko	Mitta
35216	Musta	Vas/Oik	Small	3 - 4 cm
35216	Musta	Vas/Oik	Large	5 - 6 cm

Mitta: Pituus MCP I nivelen keskeltä IPI nivelen keskelle.



## RADIALIS SORMIOSA

Radialis sormiosa koostuu kahdesta osasta, mikä tekee siitä helpomman pukea ja sovittaa optimaalisesti. Sormiosa kiinnitetään ortoosiin kädenselän pehmeää materiaalia vasten. Yksinkertainen asettaa ja mukava käyttää. Voidaan yhdistää Radialis Peukalo-osan kanssa. Tarkoitettu käytettäväksi SELECTION® ranneortoosi mallien 35204, 35205 ja 35209 kanssa.

Tuoteno.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ympärys MCP 2-5
35217	Musta	Vas/Oik	Small	17 - 20 cm
35217	Musta	Vas/Oik	Medium	20 - 23 cm
35217	Musta	Vas/Oik	Large	23 - 27 cm



## SELECTION® RIGID



SELECTION® Rigid on jäykkyydeltään mediuimtasen ranneortoosi peukaloosala. Ortoosissa on muotoiltu CS-lasta volaaripuolella ja joustavampi (1 cm leveä) suora muovilasta dorsaalipuolella. Molemmat lastat ovat irrotettavissa. Peukalo-osa antaa jäykemmän materiaalinsa vuoksi hyvän tuen. Peukalo-osan muotoilu antaa tukea thenarlihaksistolle ja pitää peukalon neutraaliasennossa. Ortoosi on matala kämmissä ja seuraa siten kämmissen luonnollista taitekohia. Koska kiinnitysnaulat tulevat ulnaaripuolelta, vähenee riski peukalon asettumisesta väärään asentoon. Kaksiosainen kiinnitys tekee ortoosista yhdellä kädellä helposti avattavan ja suljettavan ja mahdollistaa kyynärvarren leveyden säädön leveämmälle kyynärvarrelle. Peukalohihna on säädettävä. Materiaalin rakenteen vuoksi on mahdollista leikata malli saksilla optimaaliseen muotoon. Ortoosin pituus on 18 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Tulehdusten yhteydessä rasituksen kevennys ranteessa ja peukalossa, työperäiset rasitusvammat sekä reumaattiset tai rappeuttavat muutokset.

Art. nr.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
35206	Musta	Vas/Oik	X-Small	< 11 cm
35206	Musta	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm
35206	Musta	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35206	Musta	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35206	Musta	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm
35206	Musta	Vas/Oik	XX-Large	23 - 26 cm

## SELECTION® OPEN WRIST

SELECTION® Open Wrist on kokonaan avattavissa oleva malli ja helppo pukea ja riisua. Ortoosissa on muotoiltu CS-lasta volaaripuolella ja joustavampi (1 cm leveä) suora muovilasta dorsaalipuolella. Molemmat lastat ovat irrotettavissa. Kämmissen matala muotoilu seuraa kämmissen luontaista taitekohia ja peukaloaukon muotoilu antaa thenarlihasten työskennellä esteittä. Lisälanki ortoosin sisäpuolella voidaan leikata pois tarvittaessa. Ortoosiin on integroitu stabiiloiva tuen ympäri kulkeva nauha ja tuki on helppo pukea ja riisua. Ortoosin pituus on 18 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Tulehdustilat, työperäinen yllirasitus sekä reumaattiset tai degeneratiiviset muutokset.

Art. nr.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympärys
35207	Musta	Vas/Oik	X-Small	< 11 cm
35207	Musta	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm
35207	Musta	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35207	Musta	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35207	Musta	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm





## LISÄNAUHA


Ranneortoosihimme on tarjolla tarralla kiinnitettävä lisänauha ranteen lisätueksi. Nauha (46032) on käännettävissä ja sopii sekä SELECTION® että VISSION™ tuotteisiin. Nauha voidaan leikata haluttuun pituuteen ilman rispaantumista. Tuotteen kestävyys toistuvien avaamisten ja sulkeamisen osalta on testattu. Mallit 35212 ja 35213 sopivat SELECTION® malleihin.

Art. nr.	Väri	Vas/Oik	Koko	Leveys	Pakkaus
46032	Musta	Bilateraalinen	Yksi koko	5,5 cm	1 kpl
35212	Musta	Bilateraalinen	Yksi koko	5 cm	1 kpl
35213	Beige	Bilateraalinen	Yksi koko	5 cm	1 kpl

35212



35213

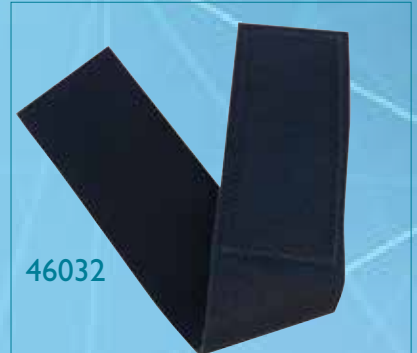

46032

## SELECTION® CS-LASTA

CS-lastamme, valmistettu Polypropyleenistä (PP), on anatomisesti muotoiltu käden lepoasentoon antropomeettisen datan pohjalta, ja näin se istuu suurimmalle osalle aikuisista. Voidaan muotoilla kuumentamalla lämpöpuhaltimella. Lasta muodostuu ohuimmista ja paksummista osista, joissa voimakkain tuki on ranteessa ohentuen siitä eteenpäin ja päättyen loivasti kaarettuun päähän ilman että se painaa. Lasta antaa dynaamista tukea sekä stabiilitettä toivotusti.



Tuotenro	Väri	Koko	Lukumäärä	Malli
35210	Sininen	Yksi koko	10 kpl/pakkaus	Volaarinen lasta
35211	Sininen	Yksi koko	10 kpl/pakkaus	Dorsaalinen lasta



## SELECTION® BROMSA

SELECTION® Bromsa rannetuki on tarkoitettu rajoittamaan liikettä ranteessa ja vähentämään kuormitusta käden ekstensoreissa sekä tukemaan rannetta ja vähentämään kipua esim. tenniskyynärpäässä. Ortoosissa on pehmeät muovilastat kämmenselän puolella, säädettävä peukalonauha ja SELECTION® nauhat. Tuen voimakkuutta voidaan säätää käyttämällä molempia lastoja tai vain yhtä. Nyörikiinnityksen ansiosta ortoosi istuu paremmin kädessä ja antaa paremman tuen. Ortoosin pituus on 15 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Lateraali epikondyliitti, ylliliikkuvuus, reumaattiset ongelmat, määrittelemätön kipu.

Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäry
35208	Musta	Vas/Oik	X-Small	<11 cm
35208	Musta	Vas/Oik	Small	11-14 cm
35208	Musta	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35208	Musta	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35208	Musta	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm



Tuen voimakkuutta voidaan säätää käyttämällä eri määrää lastoja tai jättämällä lasta pois.



## SELECTION® LASTEN PEUKALOTUKI

Pehmeä ja kaunis peukalo-ortoosi lapsille. Ortoosi ohjaa peukalon toiminnalliseen asentoon ja helpottaa otetoimintoja ja tukee CMC- ja MCP-I niveliä. Malli ympäröi thenarlihaksen ja antaa tukea samalla kun parantaa asentoa. Turkoosi lenkki ranteen nauhassa helpottaa ortoosin riisumista yksinkertaisella liikkeellä. Peukalon nauha on säädettävissä ja reunoja voidaan leikata tarpeen mukaan.

### Käyttöalueet

Plexus brachialis vaurioista johtuvat (Erbin pareesi) käden alueen virheasennot, Cerebral Paresista aiheutuva spastisuus, artrogrypoosi, reumasairaudet.



Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys	Kämmenten mitta
35300	Musta	Vas/Oik	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm
35300	Musta	Vas/Oik	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm
35300	Musta	Vas/Oik	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
35300	Musta	Vas/Oik	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
35300	Musta	Vas/Oik	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm

## SELECTION® LASTEN RANNETUKI

Jäykkyydeltään mediuimntason ranneortoosi, joka on kehitetty erityisesti lapsille. Ortoosissa on irrotettava alumiinilasta volaaripuolella ja 2 kiristysnauhaa yksinkertaista ja asteetonta kiinnitystä varten. Tämä mahdollistaa myös leveämmän kyynärvarren istuvuuden. Nauhojen tullessa ulnaaripuolelta pienenee riski peukalon asettumisesta väärään asentoon. Peukalonauha on säädettävissä ja reunat ovat pehmeät. Värikkäät yksityiskohdat on valittu lapsia ajatellen. Ortoosin pituus on 11-17,5 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Reumaattiset ongelmat. Neurologiset vammat, missä ranne tarvitsee lisätukea ja/tai sen asentoa tarvitsee korjata. Kipsauksen jälkihoitona. Tulehduksissa.



Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys	Kämmenten mitta	Ortoosin pituus volaari- puolella
35305	Musta	Vas/Oik	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm
35305	Musta	Vas/Oik	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm
35305	Musta	Vas/Oik	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm
35305	Musta	Vas/Oik	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm
35305	Musta	Vas/Oik	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm

## SELECTION® LASTEN OPEN WRIST

Lasten ranneortoosi, joka on jäykkyydeltään mediumtasoa ja siinä on irrotettava oleva muotoiltu alumiinilasta volaaripuolella. Ortoosissa on ainutlaatuista kaksoisnauhakiinnitys; toinen kiinnitetään peukalon ympäri ja toinen kiinnitetään kämmenselkään. Näin kontrolloidaan paremmin peukalon abduktio ja adduktio liikeitä ja estetään peukalon virheasento. Selection lasten Open Wrist rannetuki on tarkoitettu immobilisoimaan CMC niveltä ja rannetta kivun lievittämiseksi sekä ohjaamaan rannetta neutraaliin asentoon. Tarvittaessa sitä voidaan myös käyttää tukemaan rannetta trauman/leikkauksen jälkeen. Ortoosin pituus on 16 cm volaaripuolella.

### Käyttöalueet

Reumaattinen artriitti, CP, trauman/leikkauksen jälkeen.



Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäryys	Kämmenen mitta	Ortoosin pituus volaari-puolella
35306	Musta	Vas/Oik	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm
35306	Musta	Vas/Oik	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm
35306	Musta	Vas/Oik	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm

## SELECTION® Ulnaarideviaatio-tuki

SELECTION® Ulnaarideviaatio-tuki on tarkoitettu parantamaan sormien asentoa paremman käden hallinnan ja toiminnallisen otteen saavuttamiseksi. Ortoosi antaa tukea rakenteelle ja lievittää kipua. Se antaa tukea MCP ja PIP nivelille samalla kun se parantaa sormien ekstensorien liikesuuntaa. Ortoosi on suunniteltu siten, että kangasmateriaali ulottuu reilusti ulnaarisivun ja 5. MCP-nivelen yli ja antaa siten parhaan mahdollisen tuen ja linjauksen sekä jakaa painetta. Tarra voidaan kiinnittää mihin tahansa kohtaan materiaalissa, joten nauhojen kiinnityskohdalle ei ole rajoituksia optimaalisen asennonkorjauksen saavuttamiseksi.

Ohut ja taipuisa ortoosi voidaan yhdistää ranneortoosiin kun lisätuki on tarpeen. Erityissuunnitellut vahvistukset (pinnoittamattomasta) matalalämpömuovista voidaan kiinnittää suoraan ortoosia vasten.

### Käyttöalueet:

Artoosipotilaat. Ulnaarideviaatio on tyypillinen henkilöillä, joilla on erilaisia inflammatorisia sairauksia, kuten esim. reuma. Selection Ulnaarideviaatitukea voidaan käyttää myös lisätukena yli liikkuville nivelille sekä heikoille lihaksille. Ei saa käyttää kontraktuneisiin niveliin

### Mitta:

Ympärysmitta MCP 2-5



Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik	Mitta
35218	Musta	Small	Vas/Oik	16-19 cm
35218	Musta	Medium	Vas/Oik	19-22 cm
35218	Musta	Large	Vas/Oik	22-25 cm

Camp Scandinavialla on tuotekehitys keskeisessä roolissa. Yhdessä asiakkaamme ja tuoteasiantuntijamme työskentelevät ahkerasti tuodakseen esille uusia materiaaleja ja uusia ratkaisuja, jotka tekevät tuotteista parempia käyttäjille. Haluaisimme mainita vielä seuraavat tuotteet erikseen - molemmat löydät kotisivuiltamme sekä kuvastosta:

**VISSION™ sarjamme peukalo- ja ranneortoosit on valmistettu tukevammasta joustavasta materiaalista ja niissä on hyvin pehmeä sisäpinta.**

**NEO™ peukalo-ortoosit lyhyenä ja pitkänä mallina. Hyvännäköinen synteettinen neopreeni- malli, joka ei sisällä lateksia.**

Lisäksi löytyy monia muita ortoosimalleja eri käyttöalueille ja toimintoihin.

Camp Scandinavia on nyt myös ylpeä saatuaan ISO 14001:2015 Ympäristösertifikaatin, joka täydentää Laatusertifikaattia ISO 9001:2015.



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD  
ISO 14001  
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD  
ISO 13485  
Medicintekniska produkter  
Ledningssystem för kvalitet

