

CAMP[®]

Toiminnallinen polviortoosit artroosiin

Yhteistyössä

 **VQ OrthoCare**[®]



Support for Better Life!


Arthroosin hoitoon tarkoitettujen polviortoosien valikoima

Camp Scandinavia yhteistyössä VQ OrthoCare:n kanssa tarjomme laajan valikoiman artroosin hoitoon tarkoitettuja OA polviortooseja. Tuotteiden laaja valikoima varmistaa, että yksilöllinen tuoteratkaisu löytyy lähes jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Ortoosien valmistusmateriaalit ovat korkealaatuisia ja niiden käyttöominaisuudet ovat ensiluokkaiset.



Tuotteiden valinta

OA polviortoosin valintaan vaikuttaa yleisesti kaksi päätekijää, vamman vakavuus ja potilaan aktiivisuustaso. Muita vaikuttaa tekijöitä ovat potilaan aiempi kokemus OA polvituista, lääkärin määräykset ja muut nivelsiteiden vammat.

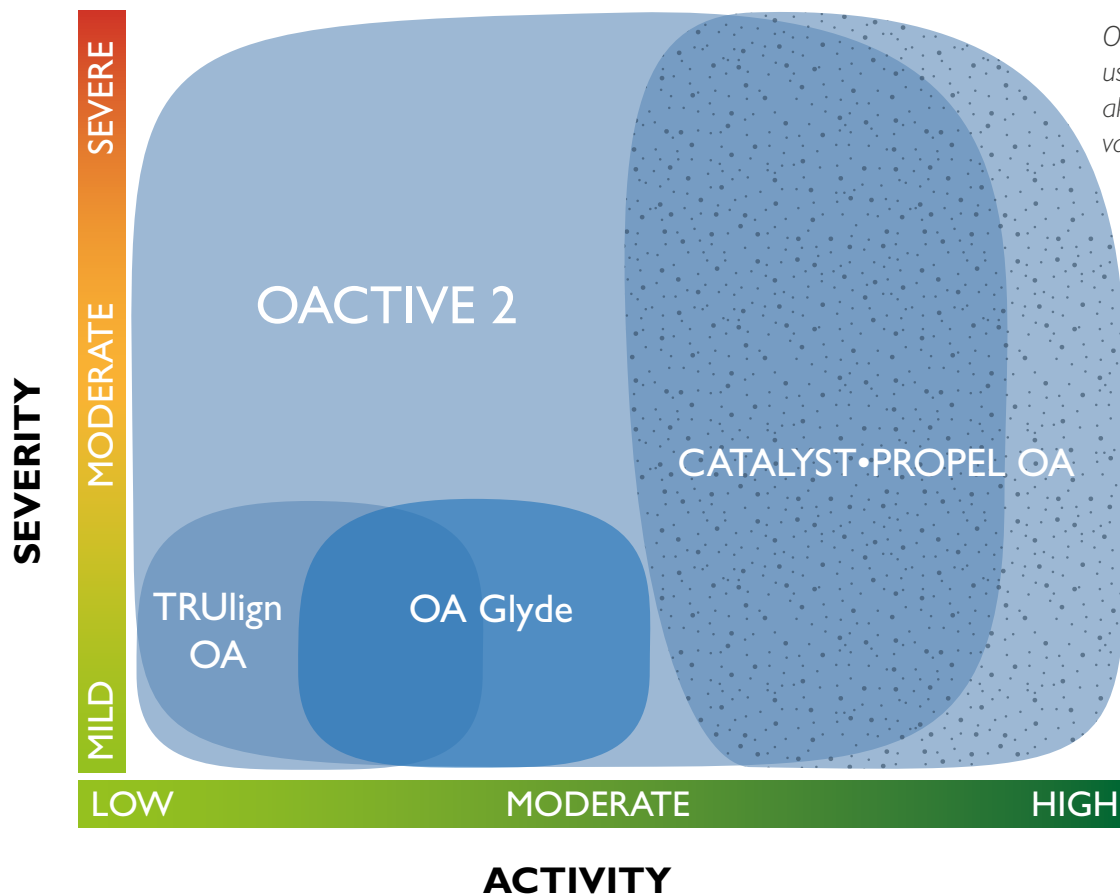


OActive® 2 sopii useimmille potilaille aktiivisuustasosta tai vammasta riippumatta.

Q-nivel teknologia


Q-nivel muuttaa ortoosin valguksen ja varuksen optimaalisen hoidan saavuttamiseksi. Q-nivelen avulla tuen antamaa korjausliikettä voidaan hienosäätää potilaan vaatimien tarpeiden mukaan.




OACTIVE®2 MEDIAALINEN TUENTA

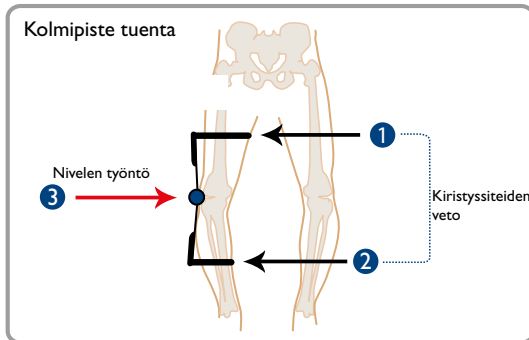


OACTIVE®2 LATERAALINEN TUENTA

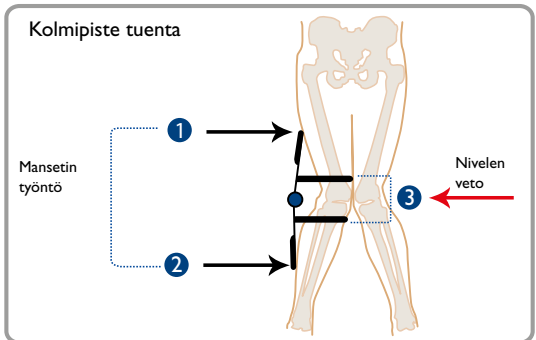


CATALYST PROPEL MEDIAALINEN TUENTA

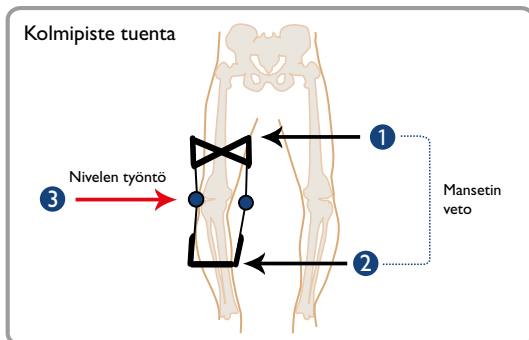


CATALYST PROPEL LATERAALINEN TUENTA

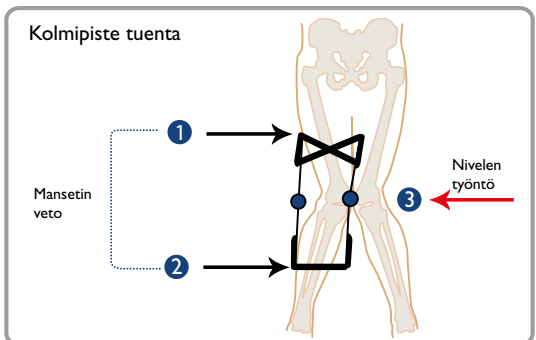

TRULIGN™ OA MEDIAALINEN TUENTA

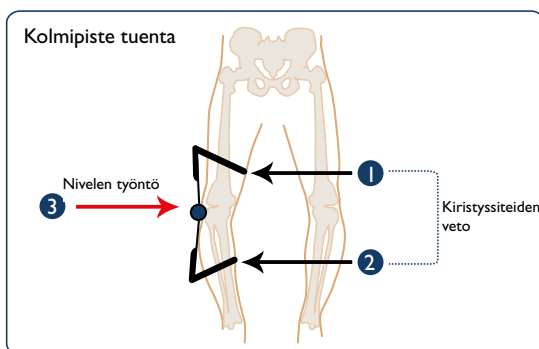

TRULIGN™ OA LATERAALINEN TUENTA

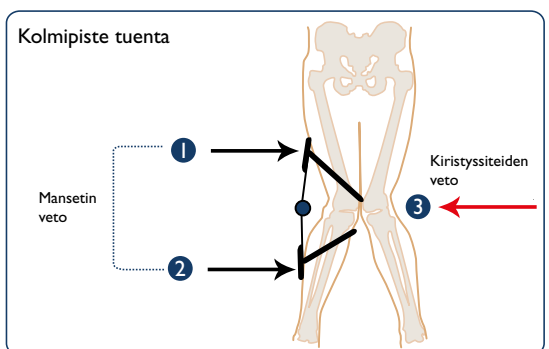

OActive® 2

Ainutlaatuinen Q-nivel säädetään vasta- tai myötöpäivään tuennan lisäämiseksi. Aloita neutraaliasennossa, polven ollessa koukistettuna 90°:ssa, ja kierrä 1/8 kierrosta kerrallaan. OActive® 2 voidaan myös asettaa rajoittamaan ekstension ja fleksion liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös vapaasti liikkuvaksi. Ortoosi toimitetaan 5° ekstensiorajoitinpala asennettuna.. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja ekstensiojoittimille.

OActive® 2 mallissa on vain yksi koko, joko oikeaan tai vasempaan jalkaan.

Kiinnitysside

Jokaisen OActive® 2:n mukana toimitetaan ortoosin liukumista estävä kiinnitysside, jota voidaan käyttää kahdella tavalla.

1. Kun ortoosi on sovitettu, kiinnitysside voidaan pukea ortoosin alaosaan estämään ortoosin liukumista.
2. Sovittamisen jälkeen kiinnitysside voidaan sijoittaa jalan ja ortoosin väliin. Ortoosin alapehmuste tulee poistaa. Tämän jälkeen paina kiinnitysside ortoosin tarranauhakiinnitystä vasten.

Vaihtoehto 2 on paras ratkaisu ortoosin liukumisen estämiseksi.



Kokotaulukko - OActive® 2			
Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
OActive® 2	Harmaa	Yksi koko	Vas
OActive® 2	Harmaa	Yksi koko	Oik
Kiinnitysside	Harmaa	61 cm	-
Kiinnitysside	Harmaa	81 cm	-
Lisänauhat (ilman solkia)	Harmaa	Yksi koko	Vas
Lisänauhat (ilman solkia)	Harmaa	Yksi koko	Oik
Pehmuste setti	Harmaa	Yksi koko	Vas
Pehmuste setti	Harmaa	Yksi koko	Oik



Catalyst Propel™ OA

Tämä nelipiste-polviortoosi on tarkoitettu lievistä vaikeaan polviar-
troosiin, jossa on polven instabiliteettiä tai loukkaantumisen jälkeen
vähentämään niveleeseen kohdistuvaa rasitusta. Ortoosissa on
ainutlaatuinen Active Thigh Cuff™ (ATC) ratkaisu reiden etupuolella.
Tämä on joustava ja vahva reisimansetti, joka mahdollistaa jouston.
Tämä antaa suojaa ja mukavuutta myötäilemällä lihasten liikkeitä koko
liikkeen ajan. Korkealaatuinen vahva, mutta matala profiili antaa parhaan mahdollisen suojan.

Ortoosin Q-nivel säädetään myötä- tai vastapäivään halutun
kevennyksen saamiseksi. Aloita neutraaliasennossa, polven ollessa
kookistettuna 90 °:ssa ja kierrä 1/8 kierrosta kerrallaan. Ortoosi
toimitetaan ohjein eri fleksio- ja extensiorajoittimille. Catalyst
Propel™ OA voidaan asettaa rajoittamaan ekstension ja fleksion
liikelaajuutta toisistaan riippumatta. Ortoosi voidaan säätää myös
vapaasti liikkuvaksi. Ortoosi toimitetaan 5° ekstensiorajoitinpa-
asettuna.. Ortoosi toimitetaan ohjein eri fleksio- ja
ekstensiojoituksille.



Kaksikertainen R.O.M Q-nivel
tarjoaa ainutlaatuisen
säätömahdollisuuden varus/
valgus-kulmiin.

Kokotaulukko - Catalyst Propel™ OA			
Koko	15cm patellan keskikohdasta ylöspäin	Polven ympärys	15cm patellan keskikohdasta alaspäin
S	37 - 43	29 - 33	29 - 33
M	43 - 49	33 - 38	33 - 37
L	49 - 57	38 - 43	37 - 42
XL	57 - 65	43 - 48	42 - 47

Edellä mainitut mitat ovat ympyrämittoja.



TRUalign™ OA

TRUalign OA™ on unilateraali kietaisumallinen polviortoosi, joka on tarkoitettu lievien tai keskivaikeiden artroosin hoitoon. Käyttäjystävälliset kiinnityspainikkeet helpottavat ortoosin pukemisesta.

Ortoosi on anatominen muotoilu, ja materiaalin hyvä joustavuus takaavat hyvän istuvuuden ja kompression. Materiaali on ilmavaa ja miellyttävää. Q-nivel-teknologia tarjoaa käyttäjälle tukevan 3-pistetuennan vähentäen artroosin aiheuttamaa painetta ja kipua.

Käyttöalueet: Yksipuolinen mediaalinen tai lateraalinen, lievä tai kohtalainen polven artroosin hoitoon.



Kokotaulukko - TRUalign™ OA		
Koko	15cm patellan keskikohdasta ylöspäin	15cm patellan keskikohdasta alaspäin
S/M	36-47 cm	28-36 cm
M/L	47-65 cm	36-48 cm
L/XL	65-81 cm	48-64 cm

Edellä mainitut mitat ovat ympyrämittoja.



Glyde OA™

Glyde OA™ on unilateraali kevyestä keskivaikean polven artroosin hoitoon suunniteltu OA polvituki. Yksinkertaisella painonapilla suljettavat kiristysriihnat istuvat reisilihaksen päällä vähentäen paineentuntua kompression avulla. Hengittävä DiamoCool™-kangas tarjoaa miellyttävän kompression ja piilottaa ortoosin kolmipistekiinnityksen.

Käyttöalueet: Enkelsidig medial eller lateral mild till måttlig knäartros.



Kokotaulukko - OA Glyde™		
Koko	15cm patellan keskikohdasta ylöspäin	15cm patellan keskikohdasta alaspäin
Small	36 - 43	29 - 34
Medium	43 - 51	34 - 39
Large	51 - 61	39 - 46
X-Large	61 - 71	46 - 52
XX-Large	71 - 81	52 - 60

Edellä mainitut mitat ovat ympyrämittoja..



Kokotaulukko

Tuote.nro. Vasen	Tuote.nro. Oikea	Malli	Koko	Väri
550001000	550002000	OActive 2 (max 135 kg)	Yksi koko	Harmaa
550011011	550012011	Catalyst·Propel OA, ATC	Small	Harmaa
550011012	550012012	Catalyst·Propel OA, ATC	Medium	Harmaa
550011013	550012013	Catalyst·Propel OA, ATC	Large	Harmaa
550011014	550012014	Catalyst·Propel OA, ATC	X-Large	Harmaa
550011015	550012015	Catalyst·Propel OA, ATC	XX-Large	Harmaa
550181011	550181011	TruLIGN OA	Small/Medium	Musta
550181012	550182012	TruLIGN OA	Medium/Large	Musta
550181013	550182013	TruLIGN OA	Large/X-Large	Musta
550241011	550242011	OA Glyde, medial	Small	Musta
550241012	550242012	OA Glyde, medial	Medium	Musta
550241013	550242013	OA Glyde, medial	Large	Musta
550241014	550242014	OA Glyde, medial	X-Large	Musta
550241015	550242015	OA Glyde, medial	XX-Large	Musta
550251011	550252011	OA Glyde, lateral	Small	Musta
550251012	550252012	OA Glyde, lateral	Medium	Musta
550251013	550252013	OA Glyde, lateral	Large	Musta
550251014	550252014	OA Glyde, lateral	X-Large	Musta
550251015	550252015	OA Glyde, lateral	XX-Large	Musta
550121000	550122000	OActive® Lisänauhat (ilman solkia)		
550131000	550132000	OActive®2 Pehmuste setti		
550140061		Suspension Wrap	6 l cm	
550140081		Suspension Wrap	8 l cm	