


**CAMP**<sup>®</sup>

# MultiStatic



**KORJAANTUVIEN  
KONTRAKTUURIEN  
HOITON**

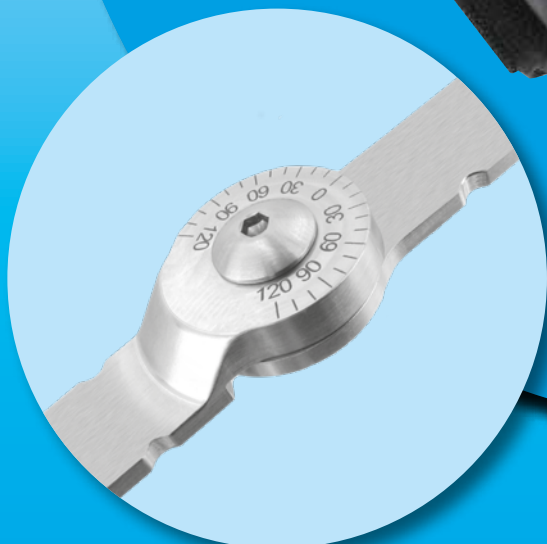


# MultiStatic

## KORJAANTUVIEN KONTRAKTUURIEN HOITOON

MultiStatic-nivel on tarkoitettu käytettäväksi korjaantuvien kontraktuurien hoitamiseen aikuisilla ja lapsilla. Nivel mahdollistaa nopean, tehokkaan ja riittävän staattisen kontraktuurien hoidon. Nivel toimii HLBS-periaatteen (High Load Brief Stretch) mukaisesti. Nivelen kulma säädetään eksentrisellä akselilla. MultiStatic-nivel on tarkoitettu käytettäväksi ortooseissa, joihin ei varata painoa. Suosittelemme käyttämään MultiStatic-nivelen toisella puolella jotakin vapaasti liikkuvaa perusniveltä ortoosin vääntövoiman ja rotaation varmistamiseksi.

### MultiStatic-nivelen käyttöedut:

- Optimaalinen nivelakselin asento; kulmaa on helppo säätää
- Voidaan käyttää sekä fleksiassa että ekstensiossa
- Vapaa kulmansäätö +120°-120°
- Integroitu nivel
- Toimii bilateraalisesti
- Nivel on valmistettu ruostumattomasta teräksestä

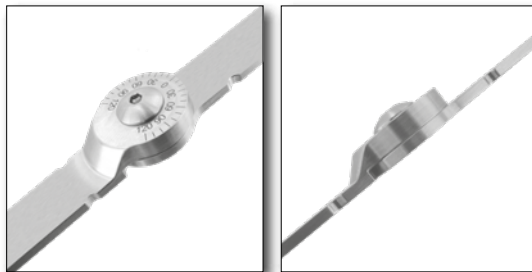

Tuotenro.	Koko	Leveys	Pituus	Korkeus	Halkaisija	Paino
696890000	X-Small	9 mm	100 mm	6,5 mm	11 mm	14 g
696900000	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
696910000	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
696920000	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g



## MultiStatic Kaksisuuntainen perusnivel

Tätä vapaasti liikkuvaa kaksisuuntaista perusniveltä käytetään yhdessä MultiStatic-hoitonivelen kanssa vääntövoiman sekä parhaan mahdollisen toiminnon takaamiseksi.

### Edut:

- Nivelen liikkuvuutta ei ole rajoitettu
- Helppokäyttöinen kaksisuuntainen perusnivel
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä



Art.nr.	Leveys	Pituus	Korkeus	Halkaisija	Paino
696950000	12 mm	400 mm	11 mm	18 mm	105 gram
696960000	16 mm	400 mm	11 mm	22 mm	140 gram

**Lisätietoa saat nettisivuiltamme [www.camp.fi](http://www.camp.fi) tai asiakaspalvelustamme 09-350 7630**